


## Pipetas multicanal Pipet-Lite XLS+ Peso ligero y rendimiento óptimo



### Ligeras

El diseño ergonómico de las pipetas multicanal ligeras Pipet-Lite XLS+ de Rainin proporciona una comodidad y un rendimiento extraordinarios, incluso después de horas de pipeteo. En sus manos, son equilibradas y robustas, con un ajuste y un acabado de primera clase.

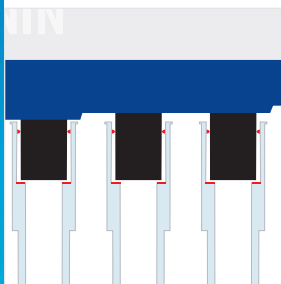

### Óptima ergonomía

Nada puede compararse a la ergonomía y la facilidad de uso de LiteTouch System de Rainin. El diseño patentado de la punta y el eje LTS de Rainin presenta una pequeña área de sellado y un tope positivo, lo que proporciona un sellado rápido y perfecto en todos los canales. Gracias a la expulsión progresiva y al LTS, las puntas se expulsan con facilidad y con menos fuerza.



### Mayor control

Las pipetas multicanal Pipet-Lite XLS+, con su ergonomía y su tecnología avanzada, se encuentran entre las más sencillas y con mayor capacidad de respuesta que usará jamás. El funcionamiento del pulsador es fluido y absolutamente uniforme de principio a fin.



### Uniformidad de los canales

Además de LTS, el nuevo diseño de la barra de empuje de todas las pipetas multicanal XLS+ garantiza una aspiración y una dosificación uniformes y regulares en todos los canales.



### Pipetas multicanal Pipet-Lite XLS+ Precisión y rendimiento superiores

La Pipet-Lite™ XLS+™ de Rainin se encuentra entre las pipetas multicanal manuales más avanzadas del mercado en términos técnicos y ergonómicos. Equipada con la tecnología patentada LiteTouch™ System (LTS™) de Rainin, esta pipeta multicanal se carga con rapidez, es fácil de manejar y permite una recogida uniforme y precisa de muestras en todos los canales. De fabricación robusta y con materiales de excelente calidad, nuestras pipetas multicanal proporcionan un servicio constante y fiable durante años. Además, como en todas las pipetas XLS de Rainin, la etiqueta RFID incorporada permite hacer un seguimiento avanzado de las calibraciones.

# Pipetas multicanal Pipet-Lite XLS+

## Rendimiento que puede apreciar

### Funciones avanzadas

- Formatos de 8 y 12 canales para volúmenes de 1 a 1200 µL.
- LTS para una recogida de muestras uniforme en todos los canales y un sellado fiable y sin fugas.
- Expulsión progresiva y montaje de puntas rápido y sencillo para reducir la fuerza.
- Diseño de soporte para dedo y empuñadura ergonómicos.
- Bloqueo de ajuste de volumen que evita las derivas.
- Amortiguador incorporado en el expulsor de puntas que reduce la tensión para los pulgares.
- Etiquetas RFID de las pipetas para la gestión de activos.



## Características técnicas

### Especificaciones

Modelo	Volumen (µL)	Incremento (µL)	Exactitud		Precisión	
			%	µL (±)	%	µL (≤)
10 µL	1,0	0,02	4	0,04	5	0,05
	5,0		1,5	0,075	1,5	0,075
	10,0		1	0,1	0,5	0,05
20 µL	2	0,02	7,5	0,15	4	0,08
	10		1,5	0,15	1,5	0,15
	20		1	0,2	0,5	0,1
50 µL	5	0,05	3,5	0,18	2	0,1
	25		1,2	0,3	0,5	0,125
	50		0,8	0,4	0,4	0,2
200 µL	20	0,2	2,5	0,5	1,2	0,24
	100		0,8	0,8	0,25	0,25
	200		0,8	1,6	0,3	0,6
300 µL	30	0,5	2,5	0,75	1,5	0,45
	150		0,8	1,2	0,3	0,45
	300		0,8	2,4	0,25	0,75
1200 µL	100	2	3,6	3,6	1	1
	600		0,8	4,8	0,3	1,8
	1200		0,8	9,6	0,2	2,4

### Información de pedido

Referencia MT	Descripción	Rango de volumen
8 canales		
17013802	L8-10XLS+	0,5-10 µL
17013803	L8-20XLS+	2-20 µL
17013804	L8-50XLS+	5-50 µL
17013805	L8-200XLS+	20-200 µL
17013806	L8-300XLS+	20-300 µL
17014496	L8-1200XLS+	100-1200 µL
12 canales		
17013807	L12-10XLS+	0,5-10 µL
17013808	L12-20XLS+	2-20 µL
17013809	L12-50XLS+	5-50 µL
17013810	L12-200XLS+	20-200 µL
17013811	L12-300XLS+	20-300 µL
17014497	L12-1200XLS+	100-1200 µL



### Mettler-Toledo Rainin, LLC

Sujeto a cambios técnicos  
 © 03/2018 Mettler-Toledo Rainin, LLC  
 Impreso en Suiza 17700762 Rev J



MARCAS COMERCIALES DE RAININ: Rainin, Pipet-Lite, XLS, XLS+, LTS, LiteTouch, Pipetting 360° y el logotipo de Pipetting 360° son marcas registradas de Mettler-Toledo Rainin, LLC.

[www.mt.com/rainin](http://www.mt.com/rainin)

Para más información